

TILDA™

Inclina il sedile e rende molto più semplice l'entrata e l'uscita dall'auto



Mantenendo i piedi sull'appoggiapiedi opzionale, non è più necessario alzarli durante l'entrata e l'uscita dall'auto



Tilda in Combinazione con il Carony.

Inclina il sedile in tre posizioni diverse

Tilda si combina in modo eccezionale con il Turnout e rende più facile entrare e uscire dalla vettura. Mantenendo i piedi sull'appoggiapiedi opzionale, essi si alzano automaticamente per rendere l'entrata e l'uscita dalla vettura ancora più confortevole.

Se si utilizza anche il Carony, l'utilizzatore può restare seduto sempre in posizione inclinata, sia durante la rotazione della piastra, sia durante il trasferimento sul Carony



TILDA™

TILDA è stata progettata per essere installata sotto il sedile BEV in combinazione con:


TURNOUT: piastra girevole manuale o elettrica con o senza le guide di scorrimento

CARONY: consente al sedile BEV di essere spostato su una base per carrozzina e diventare così una vera e propria sedia a rotelle.

L'appoggiapiedi è disponibile come optional.



*Tilda in posizione 3 in combinazione con il TURNOUT, con le guide del Carony installate su entrambi i lati
L'appoggiapiedi è disponibile come optional*

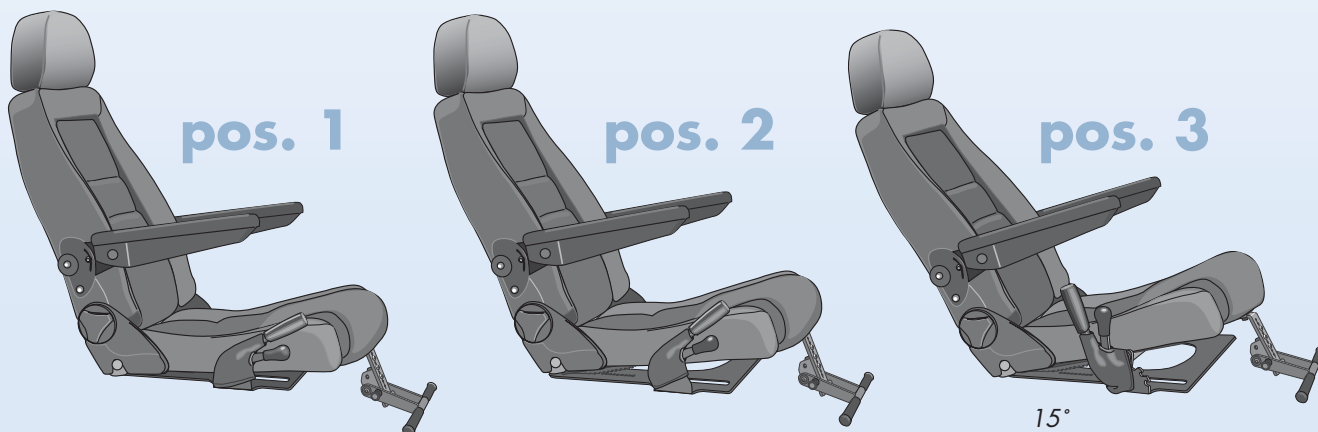

Impugna e stringi le due levette dell'impugnatura per sganciare Tilda e cambiarne la posizione

Ha superato i crash test

Tilda ha superato i crash test in posizione 1 e posizione 0 (nessuna inclinazione).

TILDA soddisfa le direttive :
74/60/EEC - 2000/4/EG, 74/408/EEC - 2005/39/EEC
93/42/EEC, 95/28/EG, ECE R-17, ECE R- 21,
SS-EN 12182, ISO 3795
FMVSS 201, 207, 208 e 302

Peso massimo dell'utilizzatore: 150 Kg.

Altezza, sotto il sedile: 24 mm

Larghezza: 520 mm

